

中藍 C-BLAKE

電氣手套 MODEL CS-021H


電氣腳套 MODEL CS-021F

說明書及保証書

重要安全使用介紹使用
務請詳閱說明書

ELECTRIC THERMAL HAND MITTS
FOOT BOOTIES

美容保健用品

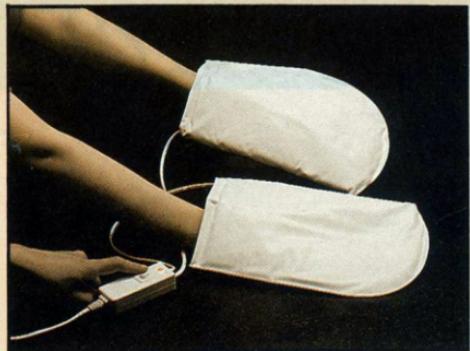

電氣手套



電氣腳套

特點：

- 遠紅外線(波長8-16 MIRCON)滲透原理設計，具有促進血液循環，有益人體皮膚細胞之新陳代謝。
- 裝置恆溫器作溫度自動控制
 H I : 45°C ~ 50°C
 L O : 35°C ~ 40°C
- 耗電量0.02度 / 時 × 3元 / 度 = 0.06元 / 時。

效能：

- 增加化粧品，藥品之療效。
- 冬天時，手腳冰冷之保溫，幫助安眠。
- 酸痛之熱敷治療，如關節炎，風濕症，麻木復健，神經痛，運動傷害等。

使用方法：

1. 使用前請將指甲、腳趾甲剪修平滑以免刺破本產品。
2. 插入110V—120V 電源，調整開關至適當溫度，先設定低溫(LO)後再設定高溫(HI)。
3. 作化粧品或藥品之使用時，必需先套上內裡套以保持本體清潔(內裡套可清洗)。
4. 本產品可用微濕抹巾擦拭，不可水洗，確記電源需拔掉。

使用時注意事項：

1. 睡覺時或孩童，不得使用。
2. 血液循環不良或無知覺之病患，需有人看護才可使用。
3. 使用前請檢視本體內外，如有破孔、裂痕，請勿使用。
4. 使用中請隨時調整適當溫度。
5. 請勿強壓，硬折扭擠，宜保持平整型。
6. 請勿以電線拉插頭及本體，或用本體拉電線。
7. 不用時，請置放於乾燥陰涼處。

中
國

品
牌

金
屬

安
全

保 證 卡

憑本卡享受保證優待

購買日期	年 月 日	製造號碼	
經 銷 店 章		●附 記	
		<ol style="list-style-type: none">正常使用下，發生故障，自購買日起保証壹年，修換材料免費。因使用錯誤，需換零件時，應繳付材料費。如故障請送原經銷店。本卡無購買日期或未蓋經銷售店章者無效。	
		技術	金村 陳
		品管	振坤 藍

中藍行實業有限公司 榮譽出品

高雄市三民區義華路299巷8號

TEL : (07)3842438(總機)

FAX : (07)3840786